

Tillift Birdie (compact)

20.3000500

Van der Mark
ZORGHULPMIDDELEN

€3375.90



Birdie 3000500.DIA00-0125 : €3375,90

Birdie Compact 3000510.DIA00-0125 : €3144,79



❖ Beschrijving product

- De comfortabele en stabiele tillift. Dankzij maximale bewegingsvrijheid voor de patiënt zorgt de Birdie voor een comfortabele transfer van- en naar bed, stoel en zelfs de vloer.
- De lift is speciaal ontworpen om het op- en uitvouwen van de lift zo eenvoudig mogelijk te maken, zonder het gebruik van gereedschap. Tevens kan de lift zonder gereedschap in 2 delen worden gemonteerd.
- Dankzij de grote bewegingsvrijheid is het plaatsen van een patiënt in een bed/rolstoel zeer eenvoudig voor de verzorger. Het ontwerp zorgt voor een hoge mate van comfort voor de patiënt aangezien de knieën niet in de buurt van de motor komen.
- De lift is verkrijgbaar in 2 modellen: de Birdie en de Birdie Compact.

❖ Specificaties product

Birdie

Maximale gebruikersgewicht	180 kg
Totale diepte	115 cm
Pootspreiding	65,5-104 cm
Totale hoogte	46,6-168,5 cm
Accu (40 cycles)	2,9 Ah
Totaal gewicht	42 kg

Birdie Compact


Maximale gebruiksgewicht	150 kg
Totale diepte	100 cm
Pootspreiding	53-89 cm
Totale hoogte	51,5-158,5 cm
Accu (40 cycles)	2,9 Ah
Totaal gewicht	36 kg

Eigenschappen en opties



Lange hefboom - maximaal gebruikerscomfort

De gebruiker kan gemakkelijk worden geroteerd en gepositioneerd. Geen risico op knieblessures.

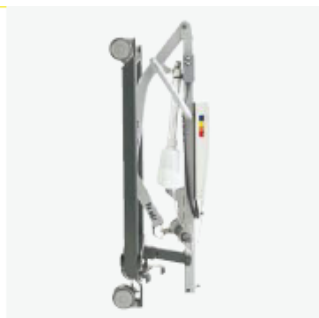

Gemakkelijk opvouwbaar en demonteerbaar

Gemakkelijk te verplaatsen en op te bergen. Geen gereedschap nodig voor het openen of uitvouwden.



Springslot

Optimale veiligheid om ongelukken te voorkomen.



Noodknop, noodverlaging en geïntegreerde lader

Manuele of elektrische noodverlaging (**Birdie Compact** alleen elektrische verlaging). Steek eenvoudig de stekker in het stopcontact om te laden.



Voetbediende pootspreiding

Stap op het pedaal om de pootspreiding te realiseren.



Handbediende pootspreiding

De stang kan gemakkelijk worden bevestigd om handmatige pootspreiding te bedienen.



Elektrische pootspreiding

Optioneel verkrijgbaar voor de standaard **Invacare Birdie**.



Duwbeugel en handbediening

Focus op ergonomie voor de verzorger.



2 punts 'Quick Release' juk

Gemakkelijk te bevestigen en te verwijderen. Verkrijgbaar in de maten 450 en 550 mm.



4 punts 'Quick Release' juk

Gemakkelijk te bevestigen en te verwijderen. Verkrijgbaar in de maten 450 en 550 mm.



Weegschaal

Goedgekeurd volgens de medische EN 45501 norm. Gecertificeerd en gesealed.



Wielen

Verkrijgbaar in 100 mm en in 75 mm (afgebeeld wiel met rem).



'Click on' juk

Gemakkelijk verwisselbare juk.